

HEA
MEDICAL AB

Armhjälpmedel Edero från Armon





Självständighet ger livskvalitet

Armon Edero är ett armhjälpmedel som underlättar för den som har begränsad styrka armar för de som bara kan använda armmuskulerna under en begränsad tid. Edero förebygger arbets- och förslitningsskador och lindrar fysiska besvär genom att avlasta axlar, armar, nacke och rygg. För en del användare är armsupport ett måste för att kunna utföra vissa rörelser. Det är även till för de som har begränsad styrka i armarna eller bara kan använda armmuskulerna under en begränsad tid.

Armon Edero kompenserar armens tyngd med hjälp av ett fjädersystem som följer kroppens naturliga rörelsemönster och får armen att sväva fritt.

Behovet av armsupport kan bero på ryggrads-, arbets- eller förslitningsskada, cerebral infarkt eller muskelsjukdom. Edero användas av personer med ALS, SMA, MS och reumatism. Av de som fått en stroke, genomgått en bröstoperation, har en ryggmärgsskada eller axelsmärtor. Edero kan också vara till hjälp vid monotona arbetsuppgifter. Används i vissa fall som ett armträningsredskap.



AT läkaren Elin Svensson använder Armon Edero både på jobbet och hemma i köket, med sonen Ludvig. Hon fick operera bort hela axelleden efter en tumörsjukdom. Nu arbetar Elin heltid igen. "Jag har varit sjuk mycket länge och verkligen längtat tillbaka till en vardag och då ingår det att kunna jobba".



Edero - armhjälpmedel

Armon Edero är ett mekaniskt armhjälpmedel som kompenserar armens tyngd med en fjäder som kan justeras i tolv steg. Edero följer kroppens rörelser och kan monteras på bordskanten, på arbetsstolen, rullstolen eller på ett golvstativ. Rätt inställd svävar armen fritt.

Armhjälpmedlet Edero kan hjälpa den armsvaga med en mängd viktiga vardagssysslor, till exempel att arbeta med datorn och själv hantera tangentbord och musplatta. Edero passar bra för den som har begränsad styrka i armarna, eller bara orkar använda armarna under kort tid. Med armhjälpmedlet kan brukaren klia sig på näsan, äta och dricka själv eller kamma sig – saker som alla med normal armstyrka tar som självklarheter. Rörelserna blir smidiga och tar mindre energi och kraft för rygg, armar och axlar. Edero styrs av kroppens egna rörelser och kan också fungera som ett armträningsredskap.

Med Edero kan användaren avlasta armar, axlar och nacke och under en längre tid positionera händer och armar i en stabil och bekväm ställning.

Edero levereras komplett med bordsklämma, parkeringsögla samt ett underarmstöd och en armskål. Beroende på brukarens situation erbjuds fyra modeller av underarmstöd och armskålar i sex storlekar.

Välj Edero i tre steg. För höger eller vänster arm, sen önskad modell av underarmstöd och slutligen storlek på armskål. Armon Edero kan med ett tillbehör monteras på arbetsstolar från Mercado och Eurovema. Vissa brukare behöver ett handstöd, ett tillbehör som ger stöd åt handen och handflatan.

Flera användningsområden för olika aktiviteter för självständighet och ökad livskvalitet

Kommunicera via tangentbord eller läsplatta. Äta, dricka, teckna, skriva. Pudra näsan, kamma håret. Lägga pussel. Eller träna upp funktionen i armarna.

ISO-koder

- ISO 24 18 27 Underarmstöd som underlättar manuella aktiviteter
- ISO 22 12 03 Manuella hjälpmedel för att teckna och skriva
- ISO 22 36 21 Hjälpmedel för att positionera skärmpekare och för att välja objekt på bildskärmen
- ISO 04 48 15 Arm, bål och benträningsredskap
- ISO 15 09 27 Äthjälpmedel



Underarmstöd

Underarmstödet finns i fyra modeller för höger eller vänster arm. Alla underarmstöd har en anpassningsbar bygel som ger stöd ovanför armbågen. Den är av rostfritt stål, överdragen med icke allergent gummi och går att böja för bästa passform. Modell 1 är den enklaste och modell 4 den mest avancerade. Vi rekommenderar modell 2 och modell 3, som passar de flesta brukare. Parkeringsögla ingår i alla underarmstöd.

Modell 1



Modell 1 har en fast metallbygel. Armskålen kan justeras på längden.

Modell 2




Modell 2 har två delar av metall. Armstödsbygeln är vridbar 45° horisontellt för att ge armen rörelsefrihet till höger och vänster. Armskålen kan justeras på längden.

Modell 3



Modell 3 har tre delar av metall. Armstödsbygeln kan justeras på längden för att balansera armen. Man justerar hur lätt det är att vinkla armen uppåt och nedåt genom att flytta armstödsbygeln. Armstödsbygeln är vridbar 45° horisontellt för att ge armen rörelsefrihet till höger och vänster. Armskålen kan justeras på längden.

Modell 4

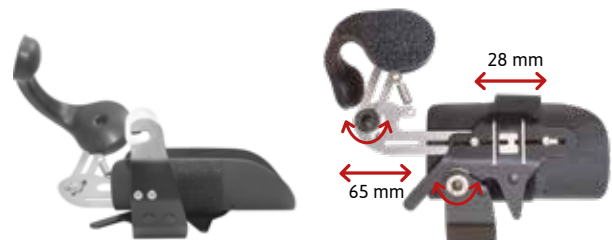

Modell 4 har fyra delar av metall. Den justerbara armstödsbygeln har en extra rotationspunkt med en mothållande fjäder som gör det möjligt att sträcka ut armen. Armstödsbygeln kan justeras på längden för att balansera armen. Man justerar hur lätt det är att vinkla armen uppåt och nedåt genom att flytta armstödsbygeln. Armstödsbygeln är vridbar 45° horisontellt för att ge armen rörelsefrihet till höger och vänster. Armskålen kan justeras på längden.

Så här väljer du



1. Välj höger eller vänster

Edero set består av:
 (1) Bordsklämma
 (2) Horisontallänk
 (3) Edero bas

Art.nr	Benämning
K202R	Edero set, höger
K202L	Edero set, vänster



2. Välj underarmstöd

För höger eller vänster arm. Vi rekommenderar modell 2 och modell 3, som passar de flesta brukare.

Art.nr	Benämning
K61R	Modell 1, höger
K61L	Modell 1, vänster
K62R	Modell 2, höger
K62L	Modell 2, vänster
K63R	Modell 3, höger
K63L	Modell 3, vänster
K64R	Modell 4, höger
K64L	Modell 4, vänster



3. Välj armskål

Armskålen finns i tre bredder och fem längder. Alla skålar passar alla underarmstöd.

Art.nr	Benämning	Längd	Bredd
KS0906	Armskål	9 cm	6 cm
KS1206	Armskål	12 cm	6 cm
KS1208	Armskål	12 cm	8 cm
KS1508	Armskål	15 cm	8 cm
KS1310	Armskål	13 cm	10 cm
KS1710	Armskål	17 cm	10 cm

Tillbehör & reservdelar



Edero bas

K2007	höger
K2008	vänster



Horisontallänk

höger och vänster
K2108



Bordsklämma

K2032	Svart höger
K2033	Svart vänster



Edero axel

För arbetsstol, golvstativ och övriga monteringar
K2119



Parkeringskrok med kula

Till bordsklämma
K2117



Parkeringsögla

Till underarmstöd
K6301



Parkering Quick Release

Kort med fästmuttrar på arbetsstol, höger och vänster
K2114



Parkeringsbygel Quick Release

På underarmstöd till arbetsstol.
K2112 höger
K2113 vänster



Handstöd

K6310	Passar höger (K63R)
K6311	Passar vänster (K63L)



Armon Edero i arbetet

För arbetsstolar från Mercado Medic finns det en färdig monteringsatts.

Art.nr	Benämning
--------	-----------

KAD4011	Adapter för montering av Edero, höger
KAD4012	Adapter för montering av Edero, vänster
KAD4010	Adapter för montering av Edero, höger/vänster

Armon Products

Armon Products startade i Holland 1999. Företagets grundare har en dotter som är född med spinal muskelatrofi (SMA). För att hjälpa sin dotter utvecklade han tillsammans med Delft University of Technology ett armhjälpmedel under sex år. Resultatet blev en ny revolutionär mekanism som är basen för alla produkter från Armon.

Idag är Armon Products en utvecklare och tillverkare av avancerade dynamiska och mobila armhjälpmedel. Produkterna tillåter personer med begränsad arm och axelfunktion att flytta sina armar och händer fritt. Det blir möjligt för brukaren att genomföra alla typer av dagliga aktiviteter som skapar självständighet, frihet, självrespekt och livskvalitet.

Armon står för innovation, design, hållbarhet och är numera världsledande på marknaden av dynamiska armstöd och exporterar genom ett exklusivt nätverk av återförsäljare över hela världen. Armon Products har sin egen forsknings- och utvecklingsavdelning och samarbetar med institutioner och universitet runt om i världen. HEA Medical har samarbetat med Armon sedan 2013.

HEA Medical AB
Norra Ågatan 10
416 64 Göteborg
031-15 73 20
info@heamedical.se
www.heamedical.se

