


HEA

MEDICAL AB

Armhjälpmedel Edero från Armon



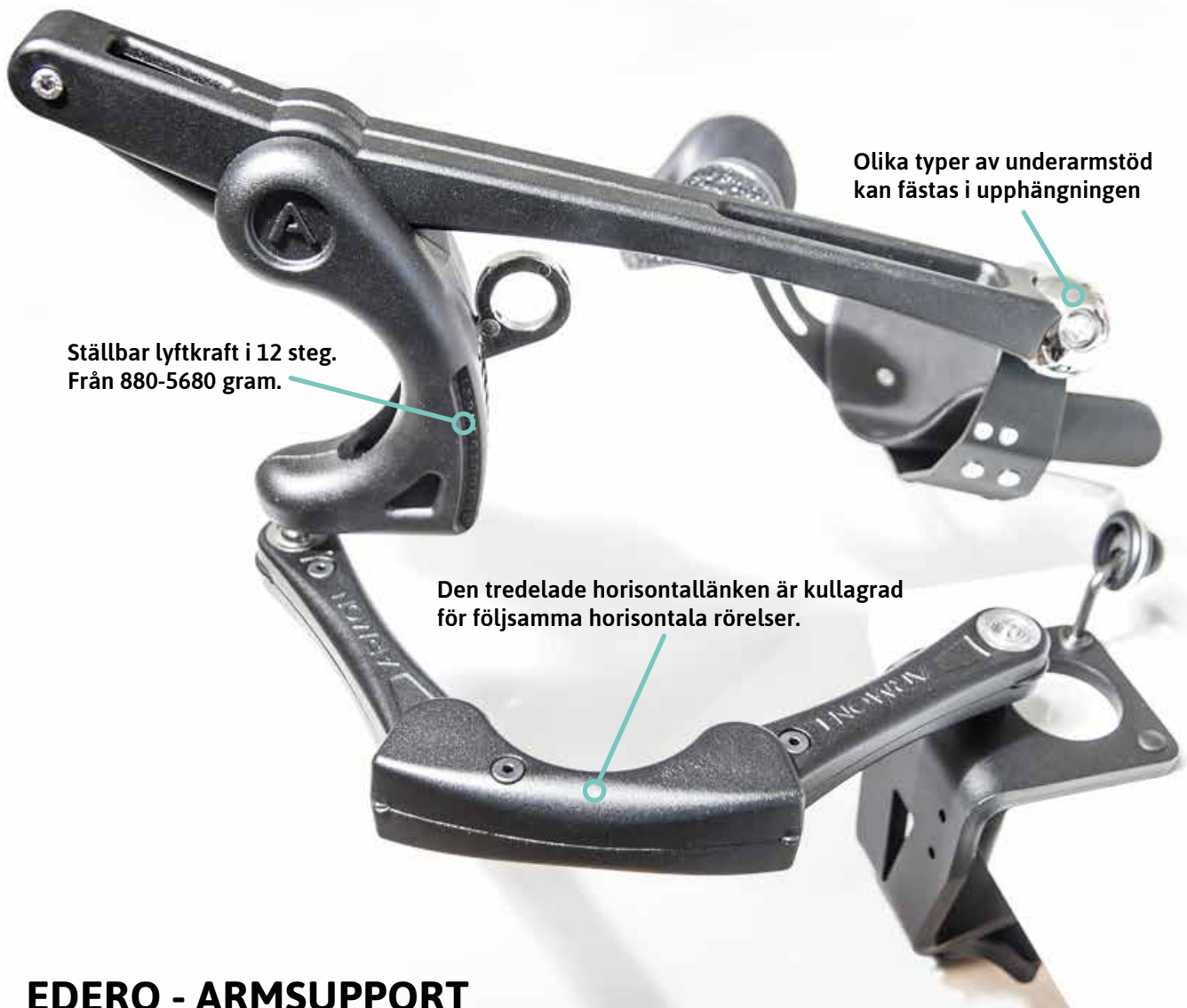

Ställbar lyftkraft i 12 steg.
Från 880-5680 gram.

Olika typer av underarmstöd
kan fästas i upphängningen

Den tredelade horisontallänken är kullagrad
för följsamma horisontala rörelser.

EDERO - ARMSUPPORT

Edero kan hjälpa den armsvage med en mängd viktiga vardagssysslor, till exempel att arbeta med datorn och själv hantera tangentbord och musplatta. För den som har begränsad styrka i armarna, eller bara orkar använda armarna under kort tid.

Med Edero kan brukaren klara saker som alla med normal armstyrka tar som självklarheter. Som att klia sig på näsan, äta och dricka själv eller kamma sig. Rörelserna blir smidiga och tar mindre energi och kraft för rygg, armar och axlar. Edero styrs av kroppens egna rörelser och kan också fungera som ett armträningsredskap.

Med Edero kan användaren avlasta armar, axlar och nacke och under en längre tid positionera händer och armar i en stabil och bekväm ställning.

Edero är ett dynamiskt armhjälpmedel som underlättar användarens egna rörelser. Den kompenserar armens

tyngd med hjälp av ett fjädersystem som följer kroppens naturliga rörelsemönster. Armens vikt balanseras så att den känns tyngdlös och svävar fritt. Horisontala rörelser över bordsytan blir flytande och vertikala rörelser från bord till mun blir lättare.

Edero hjälper brukare som har begränsad styrka i armarna eller som bara kan använda armmusklerna under en begränsad tid. Förebygger arbets- och förslitningsskador och lindrar fysiska besvär genom att avlasta axlar, armar, nacke och rygg.

Behovet av armsupport kan bero på ryggradsskada, cerebral infarkt eller muskelsjukdom. Edero användas av personer med ALS, SMA, MS och reumatism. Av de som fått en stroke, genomgått en bröstoperation, har en ryggmärgsskada eller axelsmärta. Edero används också som ett armträningsredskap, inte minst för att träna muskelminnet.

Olika aktiviteter, flera användningsområden och ISO-koder. Kommuniera via tangentbord eller läsplatta. Äta, dricka, teckna, skriva. Pudra näsan, kamma håret. Lägga pussel. Eller träna upp funktionen i armarna.

| | |
|------------|---|
| ISO 241827 | Underarmstöd som underlättar manuella aktiviteter |
| ISO 221203 | Manuella hjälpmedel för att teckna och skriva |
| ISO 223621 | Hjälpmedel för att positionera skärmppekare och för att välja objekt på bildskärmen |
| ISO 044815 | Arm, bål och benträningsredskap |
| ISO 150927 | Hjälpmedel för att äta |



foto: Linnea Bengtsson

TILLBAKA EFTER STROKEN MED EDERO

Jakob Bernéus fick en stroke som förändrade hans liv när han var 21 år. Han kunde varken gå, prata eller läsa. Sex år senare är han på väg tillbaka med hjälp av rehabilitering och ett armhjälpmedel. Jakob pratade med sin arbetsterapeut på Arbetsförmedlingen som hjälpte honom att få Edero godkänt som arbetshjälpmedel.

ELIN ARBETAR HELTID IGEN

ST läkaren Elin Svensson drabbades av en tumör, fick operera bort sin högra axelled och var långvarigt sjuk under flera år. Hon var mitt i en specialläkarutbildning inom kirurgi och fick byta inriktning till röntgen. Som röntgenläkare måste Elin utföra ultraljudsundersökningar, men det är svårt med bara en fungerande arm.

"Det var först med mitt armhjälpmedel som jag kunde gå upp till heltid. Jag har varit sjuk länge och verkligen längtat tillbaka till en vardag där jag kunde jobba heltid igen"

"Den tar tyngden, så att jag får fram armen vilket gör det lättare att skriva på datorn eller trycka på knapparna på ultraljudsapparaten. Det är märkligt att hjälpmedel för armar och axlar inte är mer uppmärksammat"

Försäkringskassan beviljade Elin en Edero monterad på en arbetsstol från Mercado. Elin använder nu Edero både på jobbet och hemma i köket, här med sonen Ludvig.





VÄLJ EDERO I TRE STEG

1 Välj för höger eller vänster arm




Edero set


K202R höger
K202L vänster

2 Välj underarmstöd och armskål

Alla underarmstöd har en bygel i rostfritt stål med icke allergent gummi som är böjbar och går att anpassa. Välj Modell 2 Twist eller Modell 3 Ergo som passar de flesta brukare

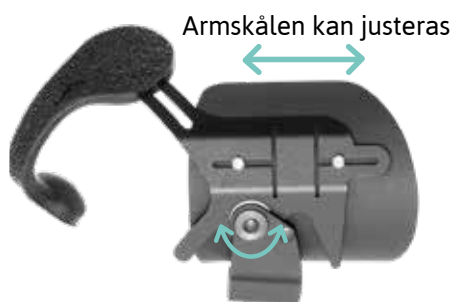

Armskålen kan justeras

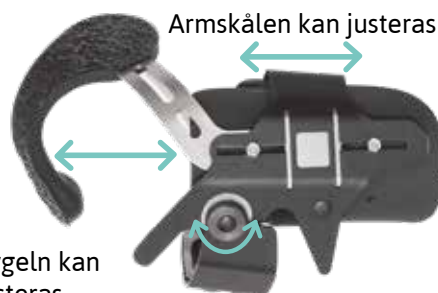

Armskålen kan justeras

Bygeln kan justeras

Underarmstöd Modell 2 - Twist

Armskålen kan justeras på längden. Kan vridas 45° horisontellt för att ge armen rörelsefrihet till höger och vänster.

Används av brukare som fortfarande har styrka i armarna som behöver mindre stöd och kortare armskål. Har inget lock. För Modell 2 Twist erbjuds tre storlekar av armskålar.

K62R-höger K62L-vänster

Underarmstöd Modell 3 - Ergo

Balanspunkten för brukarens arm kan justeras framåt och bakåt. Kan vridas 45° horisontellt för att ge armen rörelsefrihet till höger och vänster.

Används av brukare som har svagare armar, som behöver mer stöd och längre armskål. Ett övre lock ingår. För Modell 3 Ergo erbjuds tre storlekar av armskålar. Kan kompletteras med ett handstöd.

K63R-höger K63L-vänster

3 Välj armskål

Bestäm storlek genom att mäta omkretsen på underarmens tjockaste del.



| Storlek | Passar arm | Längd | Bredd | Art.nr |
|---------|------------|-------|-------|--------|
| Medium | -19 cm | 12 cm | 6 cm | KS1206 |
| Large | 19-25 cm | 12 cm | 8 cm | KS1208 |
| X-large | +25 cm | 13 cm | 10 cm | KS1310 |

Välj armskål

Bestäm storlek genom att mäta omkretsen på underarmens tjockaste del.



| Storlek | Passar arm | Längd | Bredd | Art.nr |
|---------|------------|-------|-------|--------|
| Medium | -19 cm | 12 cm | 6 cm | KS1206 |
| Large | 19-25 cm | 15 cm | 8 cm | KS1508 |
| X-large | +25 cm | 18 cm | 10 cm | KS1810 |



"Med Edero kan jag peta upp glasögonen och äta utan att spilla. Det underlättar också när jag spelar World of Warcraft"

foto: Linnea Bengtsson

Emelie Ingels bor i Dalarna och har en svår muskelsjukdom. Hon använder Edero på sin Permobil när hon är ute och på en arbetsstol från Mercado inomhus.

TILLBEHÖR & RESERVDELAR



Parkeringsbygel Quick Release
Används ihop med Parkeringsbygel höger och vänster **K2114**



Parkeringsbygel Quick Release
Används ihop med Parkeringsbygel höger **K2112** höger
K2113 vänster



Adapter för Real arbetsstolar
KAD4011 höger
KAD4012 vänster



Horisontallänk
höger och vänster
K2108



Horisontallänk - kontrollerad
höger och vänster
K2108CL



Handstöd
K6310 Passar höger (K63R)
K6311 Passar vänster (K63L)



Förlängning Edero Bas +8 cm
K2134 höger och vänster



Parkeringsögla till underarmstöd
K6301



Bordsklämma
K2032 höger
K2033 vänster

HEA Medical AB
Norra Ågatan 10
416 64 Göteborg
031-15 73 20
info@heamedical.se
www.heamedical.se

