

HEA
MEDICAL AB

Hjälmar & huvudstöd

*Bekväma
hjälmar sedan
1967*





Danmar huvudskydd - Hjälmarna för olika behov

Hjälmarna har olika egenskaper för att förhindra huvudskador. Samtliga hjälmarna är bekväma att bära och har bra ventilation. Hjälmarna med hårt skal ger störst skydd och har bäst förmåga att förhindra huvudskador. Hjälmarna med mjukt skal passar personer som behöver lindrigare skydd.

Hjälmarna kan beroende på modell, användas av personer med osäker gång eller som av andra anledningar lätt faller, till personer som är självdestruktiva eller som har skallopererats.

Vem använder skyddshjälmarna

Hjälmarna från Danmar används idag av personer med olika typer av diagnoser vilka ger varierande funktionsnedsättningar när det gäller balans, gång- och rörelseförmåga som till exempel vid Cerebral Pares. Här är ytterligare några exempel på diagnoser där vi vet att hjälmarna kan användas.

Nedärvda funktionsnedsättningar som Duchennes Muskeldystrofi och Huntingtons sjukdom.

Blodsjukdom som Hemofili, även kallad blödarsjuka.

Onkologi där Fysisk funktion, Kognitiv förmåga, eller Medicinsk behandling påverkat balans eller gång.

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som Autism och andra tillstånd inom Autismspektrat, ADHD och Tourettes syndrom.

Vid diagnoser som Alzheimers, Parkinson, ALS, MS, Demens och Stroke men även andra funktionsnedsättningar som exempelvis Epilepsi, Synnedsättning, Intellectuell funktionsnedsättning samt kognitiva störningar.

Även personer som går i sömnen använder skyddshjälmarna från Danmar.

Att tänka på vid val av hjälm

- Hur mycket fysisk aktivitet.
- Risk för självskador.
- Hur länge hjälmen ska bäras.
- Risker i omgivning, som hårda golv och skarpa kanter.

Vid tveksamhet rekommenderas att alltid starta med den hjälm som ger mest skydd för att eventuellt fortsätta med lättare hjälmarna som ger mindre skydd. Hårt skal ger störst skydd och har bäst förmåga att förhindra huvudskador. Comfy hård är lättare och har god förmåga att förhindra huvudskador. Mjukt skal ger ett lindrigare skydd. Halo har öppen topp och passar de som inte behöver ett totalt huvudskydd. Comfy mjuk är den lättaste hjälmen som ger minst skydd.

Huvudskydd ISO-kod 090603



Hjälm med mjukt skal

Hjälm med mjukt skal ger ett lindrigare skydd. Behaglig att bära med ventilationshål runt om. Inga delar av metall. Materialet är stötabsorberande EVA*-skum, som behåller sin form och förmåga att skydda huvudet. Enkel att rengöra med tvål och vatten. Avtagbar hakrem ingår. Standardfärg svart. Vikt 250 gram.

Art.nr 9820-Infant/XXS/XS/S/M/L/XL/XXL



Hjälm med hårt skal

Hjälm med hårt skal ger störst skydd och ger bäst förmåga att förhindra huvudskador. Behaglig att bära med ventilationshål runt om. Passar personer som lätt faller, är självdestruktiva, har epilepsi eller har skallopererats. Består innerst av vinylklätt stötabsorberande EVA*-skum med ett hårt skal av polyeten. Enkel att rengöra. Både skärm och haksydd är avtagbart och ingår. Standardfärg svart. Vikt 500 gram.

Art.nr 9825-XS/S/M/L/XL/XXL



Comfy mjuk

Comfy mjuk är superlätt, bekväm och den hjälm som ger minst skydd. Passar personer som behöver lindrigare skydd. Tillverkad av kompressionsformat skum. Designen erbjuder en unikt komfortabel passform med maximal ventilation för att begränsa överhettning. Enkel att rengöra med tvål och vatten. Avtagbar hakrem ingår. Standardfärg grå. Vikt 85 gram.

Art.nr 9708-XS/S/M/L



Comfy hård

Comfy hård med hårt skal är lätt med god förmåga att förhindra huvudskador. Behaglig och bekväm. Designen erbjuder en komfortabel passform med maximal ventilation för att begränsa överhettning. Med stora ventilationshål runt om. Insidan är som Comfy mjuk tillverkad av kompressionsformat skum med ett hårt skal av polyeten. Enkel att rengöra med tvål och vatten. Avtagbar hakrem ingår. Standardfärg vit. Vikt 325 gram.

Art.nr 9709-S/M/L



Halo

Halo är en hjälm med öppen topp. Lätt, stötabsoberande och bekväm. Passar personer som inte behöver ett totalt huvudskydd. Tillverkad av stötabsoberande EVA*-skum, som behåller sin form och förmåga att skydda huvudet. För att ge extra stötskydd mot pannan är den förstärkt med ett 16 mm band av skum. Överdelen har justerbara korslagda band som hjälper till att hålla hjälmen stabil. Enkel att rengöra med tvål och vatten. Avtagbar hakrem ingår. Standardfärg svart.

Art.nr 9817-XXS/XS/S/M/L/XL/XXL

*etylvinylacetat



Clear – kirurgisk hjälm

Clear är en hjälm med transparent skal. Framtagen för kirurgiska patienter. För återhämtning av skullskador efter operation. Det genomskinliga polykarbonatskalet är ventilerat och kantat med mjukt skum. Levereras med åtta flyttbara anpassningsdynor som kan användas för att justera storleken och höja eller frilägga specifika delar av hjälmen bort från sårytor. Förslag till placering av dynorna ingår i hjälmen. Avtagbar hakrem ingår. Finns endast i en storlek och transparent utförande.


Art.nr 9830

Tillbehör - Anpassningsdynor Hjässdyna, Ovala dynor, Inläggsband

Tillbehör till hjälmar med art. nr 9817, 9820 och 9825. Stötabsoberande vinylöverdragna anpassningsdynor av polyuretan. Används för att få en bättre passform eller för att fylla ut en för stor hjälm. Skummaterialet har slutna celler och är lätt att skära/klippa till och rengörs enkelt eftersom snittytorna inte släpper in fukt och lukt.

Kan även användas för att få en bättre passform till hjälmar med art. nr 9708 och 9709, men placeringen måste testas innan anpassningsdynorna klistras fast då insidan av hjälmarna med kompressionsformat skum kan skadas om man försöker lossa eller flytta anpassningsdynorna.

Art.nr	Benämning	Tjocklek
7634	Ovala dynor	6 mm
7633-6	Hjässdyna	6 mm
7633-13	Hjässdyna	13 mm
7635-6	Inläggsband	6 mm
7635-13	Inläggsband	13 mm
7640	Hakrem kardborrband	
7641	Hakrem fixspänne	
7645	Hakrem med hakkudde	
7610	Skärm till hjälm hårt skal	

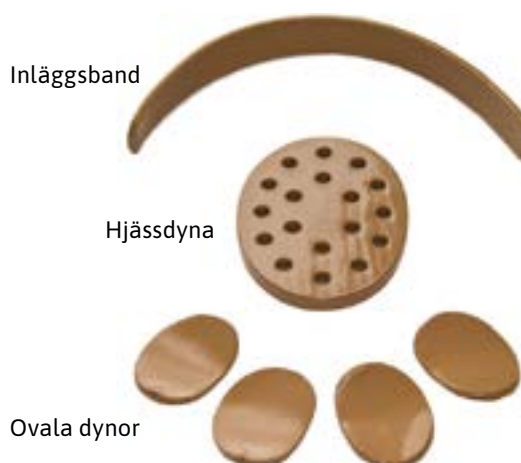

Inläggsband

Hjässdyna

Ovala dynor



Hensinger huvudstöd

Hensinger huvudstöd är en omslutande krage som stöder huvudet vid bakhuvudet och käkpartiet. Kragen är avsedd att varsamt stödja huvudet med stödytor i haka och nacke.

Huvudstödet hjälper till att hålla huvudet centrerat och upprätt, vilket underlättar andning och förmågan att svälja. En upprätt ställning stimulerar och underlättar också sociala aktiviteter.

Med snabbspännet på framsidan kan kragens band öppnas lätt. Kan användas med en bröstsele och monteras på sittsystem. Finns i tre varianter. Utan eller med fästplatta, samt med hög nacke för de som kan behöva ett extra högt huvudstöd vid bakhuvudet.

Kragen är tillverkad av vinylöverdragen polyuretanskum med ett starkt och böjligt förstärkningsmaterial runt utsidan av stödet. Med ett mjukt överdrag av bomull. Kragen har ett lätt öppnat fixspänne på framsidan. Standardfärg blå.



Hensinger finns med extra högt stöd vid bakhuvud och nacke.

ISO-kod 181012 / 181013

Art.nr	Benämning	Storlek	Inre omkrets	Tjocklek
6810-XS-UP	Hensinger utan fästplatta	X-Small	25 cm	2,5 cm
6810-S-UP	Hensinger utan fästplatta	Small	30 cm	4,0 cm
6810-M-UP	Hensinger utan fästplatta	Medium	37 cm	5,0 cm
6810-L-UP	Hensinger utan fästplatta	Large	42 cm	6,5 cm
6810-S	Hensinger med fästplatta	Small	30 cm	4,0 cm
6810-M	Hensinger med fästplatta	Medium	37 cm	5,0 cm
6810-L	Hensinger med fästplatta	Large	42 cm	6,5 cm
6809-XS-UP	Hensinger med hög nacke utan fästplatta	X-Small	25 cm	2,5 cm
6809-S-UP	Hensinger med hög nacke utan fästplatta	Small	30 cm	4,0 cm
6809-M-UP	Hensinger med hög nacke utan fästplatta	Medium	37 cm	5,0 cm
6809-L-UP	Hensinger med hög nacke utan fästplatta	Large	42 cm	6,5 cm

Huvudstöd fram

För att förhindra att hakan faller finns huvudstöd fram som ger ett fast men skonsamt lyft av hakan och sidostöd av huvudet.

Runt den bakre remmen finns en vadderad rulle för bekvämligheten. Ett mjukt tygöverdrag ingår över stödet som är tillverkad av vinylöverdragen polyuretanskum.

Detta främre huvudstöd positionerar hakan för de som behöver extra stöd. Kan användas med en bröstsele. Stödet har ett fixspänne på sidan. Standardfärg blå.




Art.nr	Benämning	Storlek
6826-XS	Huvudstöd fram	X-Small
6826-S	Huvudstöd fram	Small
6826-M	Huvudstöd fram	Medium
6826-L	Huvudstöd fram	Large

Måttagning

A Omkrets huvud


B Från ögonbrynsnivå över hjässan till den punkt där hjälmen skall sluta.

C Från öra till öra över hjässan.

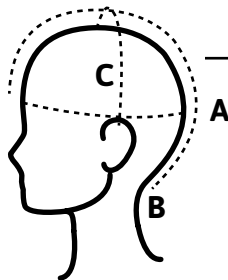

A Omkrets hals

B Örsnibb till axel. Huvud och halsformer varierar. Tillåt cirka 2-3 cm mellan örsnibb och huvudstödet ovansida.

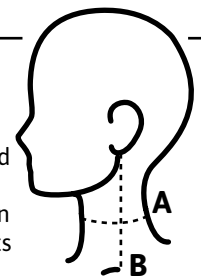

Mjuka hjälmar

Storlekar	A (cm)	B (cm)	C (cm)
Infant	41-43	29	21
XX-small	44-46	32	24
X-small	48-50	34	25
Small	53-55	38	30
Medium	54-56	42	32
Large	58-60	42	33
X-large	61-63	44	34
XX-large	65-67	47	35

Hårda hjälmar

Storlekar	A (cm)	B (cm)	C (cm)
XX-small	45-46	32	24
X-small	50-51	35	25
Small	52-54	37	27
Medium	56-57	39	28
Large	57-59	42	30
X-large	62-64	44	33
XX-large	66-68	47	38

Huvudstöd fram

Storlekar	A (cm)	B (cm)
X-small	20-25	4-6
Small	23-30	5-8
Medium	28-36	6-10
Large	33-43	9-13

Är måttet mellan två storlekar, välj den större, justera med dynor.

Om Danmar Products

Danmar Products kommer från Michigan i USA. Bolaget grundades 1967 och tillverkar specialprodukter för människor med särskilda behov, som hjälmar, huvudskydd och huvudstöd för att förbättra funktion och komfort för människor med funktionsnedsättningar.

Danmar tillverkar samtliga produkter i egen fabrik i Ann Arbor, Michigan. Bolaget är specialiserat för tillverkning av högkvalitativa produkter till en marknad med unika behov.

HEA Medical har samarbetat med Danmar sedan 1997 och är sedan 2022 Auktoriserad Representant i Europa.



Danmar Products

ETT BÄTTRE LIV

HEA grundades 1929 och vår ide är att erbjuda människor med funktionsvariationer möjligheten till ett bättre liv med hjälp av smarta hjälpmedel från hela världen.

