


HEA
MEDICAL AB

Hjälmar & huvudstöd

Bekväma
hjälmar med
bra ventilation
som är sköna
att bära.

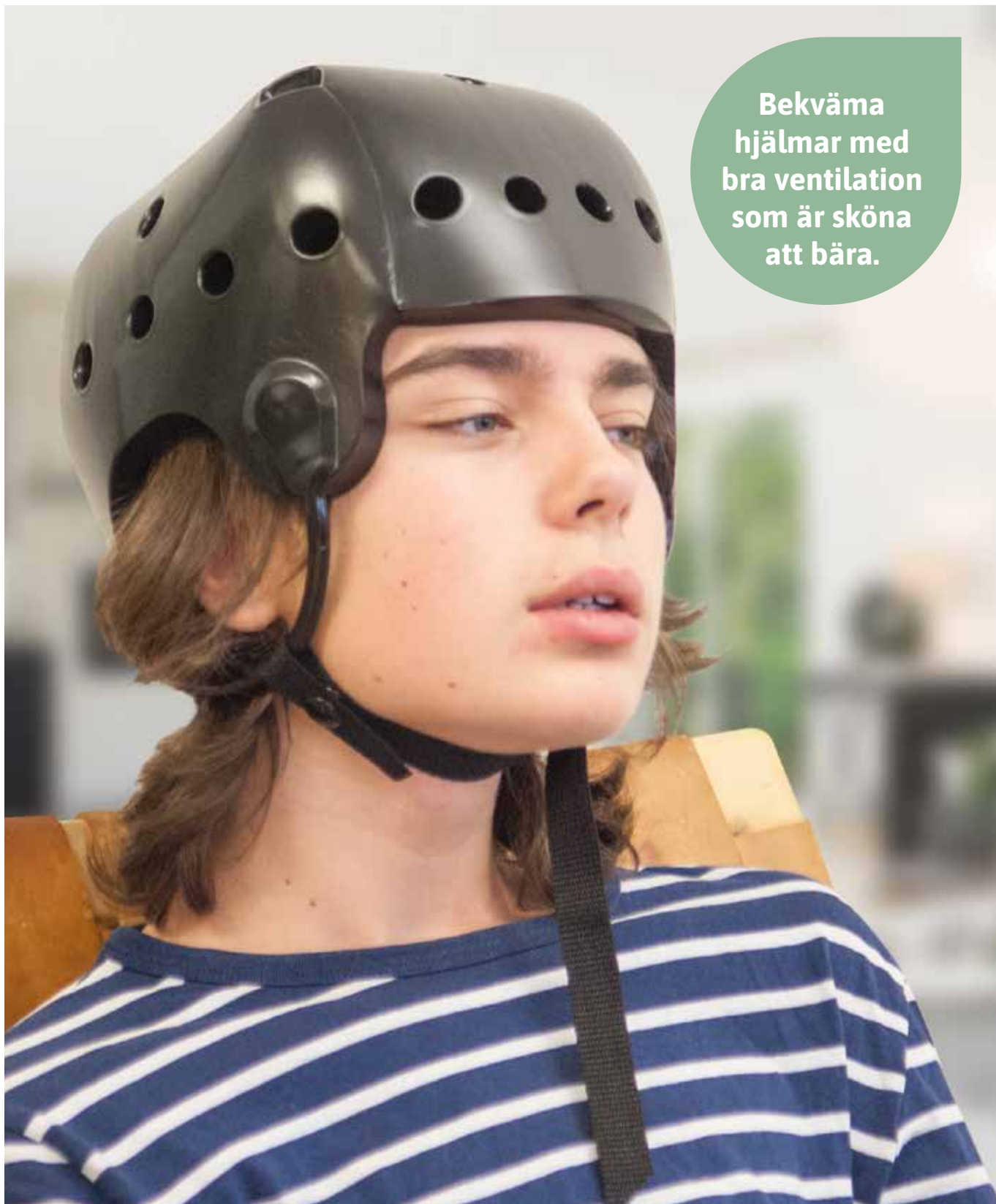

DANMAR - SKYDDSHJÄLMAR

Bekväma hjälmar med bra ventilation.



Har god förmåga att förhindra huvudskador och är bekväm att bära. Hjälmen med mjukt skal passar för personer som behöver lindrigare skydd. Hjälmen med hårt skal är till för personer som lätt faller, är självdestruktiva, har epilepsi eller har skalopererats.

Hjälmar med mjukt skal

Materialet är stötabsorberande EVA-skum*, som behåller sin form och förmåga att skydda huvudet. Hjälmen har ventilationshål. Lämplig för personer som behöver lindrigare skydd.

Hjälmar med hårt skal

Hjälmen har god förmåga att förhindra huvudskador och är behaglig att bära. Den har ventilationshål runt om. Består innerst av vinyklätt stötabsorberande EVA-skum*, liksom den mjuka hjälmen, och utanpå ett hårt skal av polyeten. Både skärm och hakskydd är avtagbart.

Hjälmen kan användas av personer

- Med osäker gång, som lätt faller; de med epilepsi
- Som är självdestruktiva
- Som skalopererats


Att tänka på vid val av hjälm

- Hur mycket fysisk aktivitet
- Risker i omgivning, som hårda golv och skarpa kanter
- Risk för självsador
- Hur allvarliga och frekventa epilepsianfall
- Hur länge hjälmen ska bäras

Huvudskydd ISO-kod 090603

*etylvinylacetat

Måttagning

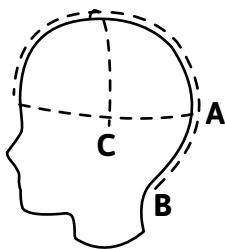

A Omkrets huvud

B Från ögonbrynsnivå över hjässan till den punkt där hjälmen skall sluta.

C Från öra till öra över hjässan.

Mjuka hjälmar

Storlekar	A (cm)	B (cm)	C (cm)
Spädbarn	41-43	29	21
XX-small	44-46	32	24
X-small	48-50	34	25
Small	53-55	38	30
Medium	54-56	42	32
Large	58-60	42	33
X-large	61-63	44	34
XX-large	65-67	47	35

Hårda hjälmar

Storlekar	A (cm)	B (cm)	C (cm)
-	-	-	-
XX-small	45-46	32	24
X-small	50-51	35	25
Small	52-54	37	27
Medium	56-57	39	28
Large	57-59	42	30
X-large	62-64	44	33
XX-large	66-68	47	38

Skyddshjälm



Hjälm med mjukt skal

Hjälmens har ventilationshål och inga delar är av metall. Passar personer som behöver lindrigare skydd. Materialet är stötabsorberande EVA-skum, som behåller sin form och förmåga att skydda huvudet. Enkel att rengöra med tvål och vatten. Avtagbart hakskydd. Standardfärg svart. Vikt 250 gram.

Art.nr 9820-Spädbarn/XXS/XS/S/M/L/XL/XXL



Hjälm med hårt skal

Hjälmens har god förmåga att förhindra huvudskador och är behaglig att bära med ventilationshål runt om. Passar personer som lätt faller, är självdestruktiva, har epilepsi eller har skalopererats. Gjord av vinylklätt stötabsorberande EVA-skum med ett hårt skal av polyeten. Enkel att rengöra. Både skärm och hakskydd är avtagbart. Standardfärg svart. Vikt 500 gram.

Art.nr 9825-XS/S/M/L/XL



Comfy mjuk

Hjälmens är superlätt och bekväm med ventilationshål. Passar personer som behöver lindrigare skydd. Tillverkad av kompressionsformat skum. Designen erbjuder en unikt komfortabel passform med maximal ventilation för att begränsa överhettning. Enkel att rengöra med tvål och vatten. Avtagbart hakskydd. Vikt 85 gram.

Art.nr 9708-S/M/L



Comfy hård

Hjälm med hårt skal som är lätt med god förmåga att förhindra huvudskador. Behaglig och bekväm. Designen erbjuder en unikt komfortabel passform med maximal ventilation för att begränsa överhettning. Med stora ventilationshål runt om. Passar personer som lätt faller, är självdestruktiva, har epilepsi eller har skalopererats. Insidan är tillverkad av kompressionsformat skum med ett hårt skal av polyeten. Enkel att rengöra. Avtagbart hakskydd. Vikt 325 gram.

Art.nr 9709-S/M/L

Specialhjälm



Halo

Hjälm med öppen topp. Lätt, stötabsoberande och bekväm. Passar personer som inte behöver ett totalt huvudskydd. Tillverkad av stötabsoberande EVA-skum som behåller sin form och förmåga att skydda huvudet. Förstärkt med 16 mm band över pannan för extra stötskydd. Överdelen har justerbara korslagda band som hjälper till att hålla hjälmen stabil. Enkel att rengöra. Avtagbart hakskydd. Standardfärg svart.

Art.nr 9817-XXS/XS/S/M/L/XL/XXL



Clear

Hjälm med transparent skal. Framtagen för kirurgiska patienter, för återhämtning av skullskador efter operation. Det genomskinliga polykarbonatskalet är ventilerat och kantat med mjukt skum. Levereras med åtta flyttbara anpassningsdynor som kan användas för att justera storleken och höja eller frilägga specifika delar av hjälmen bort från särytor. Förslag till placering av dynorna ingår i hjälmen. Avtagbart hakskydd. Finns i en storlek.

Art.nr 9830

Hensinger huvudstöd (ISO-kod 181012)



Hensinger huvudstöd är en omslutande krage som stöder huvudet vid bakhuvudet och käkpartiet. Huvudstödet hjälper till att hålla huvudet centrerat och upprätt, vilket underlättar andning och förmåga att svälja. En upprätt ställning underlättar också sociala aktiviteter.

Kragen består av vinylöverdragen polyuretanskum med ett överdrag av frotté. Kragen har ett lättöppnat fix-spänne på framsidan.

Art.nr	Benämning	Storlek	Inre omkrets	Tjocklek
6810-XS-UP	utan fästplatta	X-Small	25 cm	2,5 cm
6810-S-UP	utan fästplatta	Small	30 cm	3,5 cm
6810-M-UP	utan fästplatta	Medium	37 cm	5,0 cm
6810-L-UP	utan fästplatta	Large	42 cm	6,5 cm
6810-S	med fästplatta	Small	30 cm	3,5 cm
6810-M	med fästplatta	Medium	37 cm	5,0 cm
6810-L	med fästplatta	Large	42 cm	6,5 cm



Tillbehör - Anpassningsdynor för art.nr 9820 och 9825

Hjässdyna, Ovala dynor, Inläggsband

Stötabsoberande vinylöverdragna anpassningsdynor av polyuretan. Används för att få en bättre passform eller för att fylla ut en för stor hjälm.

Art.nr 7634, 7635, 7633