

HEA
MEDICAL AB

Dynor & trycksår



Action products



Action Products från Maryland i USA har sedan 1970 tillverkat produkter som innehåller polymeren Akton®, en stabil gel med mycket goda tryckupptagande och stötdämpande egenskaper. Det unika materialet uppfanns av bolagets grundare doktor McElroy hemma i källaren i slutet av 60-talet.

Gelen har en vattentätt och elastisk hudliknande film, som innesluter sitt-materialiet. Det läcker inte, det går inte att böttna och kan repareras. Kombinationen av gel och film skapar den mest skjvningbeständiga produkten på marknaden idag.

Företaget har idag etablerat sig som en ledande tillverkare och distributör av tryckavlastande produkter som används i medicinska och relaterade industrier över hela världen.

Danmar products



Danmar Products kommer från Michigan i USA. Bolaget grundades 1967 och tillverkar specialprodukter för människor med särskilda behov, som hjälmar, huvudskydd, simhjälpmedel och utrustning som används både i terapeutiska miljöer och på fritiden för att förbättra funktion och komfort för funktionsnedsatta.

Danmar tillverkar samtliga produkter i egen fabrik, som ligger i Ann Arbor i Michigan. Bolaget är specialiserat för tillverkning av produkter till en marknad med unika behov. Under drygt femtio år har Danmar Products varit lyhörda och försökt tillgodose behoven hos slutanvändaren. Danmar producerar endast högkvalitativa produkter. HEA Medical har samarbetat med Danmar sedan 1996.

Levabo

Levabo är ett danskt företag som vill göra en skillnad för den globala hälsoekonomin. Levabos produkter Heel Up®, all-Up® och All On® är uppblåsbara kuddar att användas som en-patient-produkter, för att förebygga och behandla trycksår till en låg kostnad.



Produkterna är speciellt utformade för att göra en positiv skillnad i förhållande till redan kända och använda produkter. Serien har utvecklats i samarbete med ledande sårvårds sjuksköterskor för att säkerställa optimal komfort, hygien och ergonomisk design och samtidigt ge god stabilitet.

Med kunder över hela världen, servar Levabo främst hälso- och sjukvårdssektorn, inklusive sjukhus och vårdhem.



Dynor med gel och skum från Action

Action Products har sedan 1970 tillverkat produkter som innehåller polymeren Akton, en stabil gel med mycket goda tryckupptagande och stötdämpande egenskaper. Sittdynorna har en vattentät och elastisk film, som innesluter sittmaterialet.

Gel framtagen för trycksårsprevention

Dynan består av en fast gel som är stabil med mycket goda tryckupptagande och stötdämpande egenskaper. Gelen omsluts av en vattentät och elastisk film och finns i samtliga produkter från det amerikanska företaget Action Products. Kombinationen av gel och film ger den mest skjivningsbeständiga produkten på marknaden. Gelen tål högt tryck och har inga belastningsbegränsningar. Den ger bra stabilitet, minskar skjivningskrafter och ger effektiv tryckreduktion. Den läcker inte, går inte att botten och den kan repareras. Materialet fördelar värme vilket är viktigt vid trycksårsprevention. Det minimerar risken för bakterietillväxt, absorberar inte fukt som vatten eller urin och tar varken åt sig vätska eller lukt. Materialet tål upp till 90°C värme och -20°C kyla. Gelen är fri från latex, silikon och mjukgörare vilket gör materialet lämpligt för känslig hud.

Kan rengöras med alla vattenbaserade desinfektionsmedel. För att minska vikten kombineras gelen med kallskum i de flesta modeller av rullstolsdynor från Action. Levereras med ett överdrag som ger ett skydd mot inkontinens. Överdragen går att tvätta i 90°C.

Rullstolsdynor från Action



Centurian

Minskar skjuvningskrafter och erbjuder tryckavlastning för användare med låg upp till måttlig risk för trycksår. Ett bra val för förebyggande vård. Dynan är uppbyggd med 15 mm gel ovanpå 15 mm highgrade kallsaum. Överdraget har dragkedja, bärhandtag och glidstoppande undersida. Max brukarvikt 300 kg.

Art.nr	Bredd	Djup	Höjd	Vikt
5200-2	40 cm	40 cm	3 cm	3kg
5205-2	45 cm	40 cm	3 cm	3kg



Commuter

Erbjuder tryckavlastning för personer med måttlig upp till medelrisk för trycksår. Dynan ger grundläggande skjuvningsreduktion. Bekvämt med ett tjockare lager av skum. Dynan är uppbyggd med 15 mm gel ovanpå 45 mm highgrade kallsaum. Överdraget har dragkedja, bärhandtag och glidstoppande undersida. Max brukarvikt 300 kg.

Art.nr	Bredd	Djup	Höjd	Vikt
8500-2	40 cm	40 cm	6 cm	3kg
8505-2	45 cm	40 cm	6 cm	3kg
8508-2	45 cm	45 cm	6 cm	3kg



Pilot

För användare med medel till hög risk för trycksår eller som tidigare haft problem med trycksår och har känslig hud. Uppskattas av brukare som behöver en låg dyna, som till exempel sparkar sig fram. Passar också smala personer med hög belastning på sittbenen. Dynan är uppbyggd av 25 mm gel. Överdraget har dragkedja, bärhandtag och glidstoppande undersida. Max brukarvikt 350 kg.

Art.nr	Bredd	Djup	Höjd	Vikt
9000-2	40 cm	45 cm	2,5 cm	4,5 kg
9005-2	40 cm	45 cm	2,5 cm	4,9 kg
9006-2	45 cm	40 cm	2,5 cm	4,9 kg
9008-2	45 cm	45 cm	2,5 cm	5,4 kg




Professional

För användare med skör hud och hög risk för trycksår. Eller för personer som tidigare haft problem med trycksår och har känslig hud. Dynan reducerar effektivt tryck, stötar och skjuvning. Uppskattas av brukare som behöver en låg dyna, som till exempel sparkar sig fram. Den är uppbyggd av 40 mm gel. Överdraget har dragkedja, bärhandtag och glidstoppande undersida. Max brukarvikt 400 kg.

Art.nr	Bredd	Djup	Höjd	Vikt
5100-2	40 cm	40 cm	4 cm	6,8kg

Välj rätt dyna

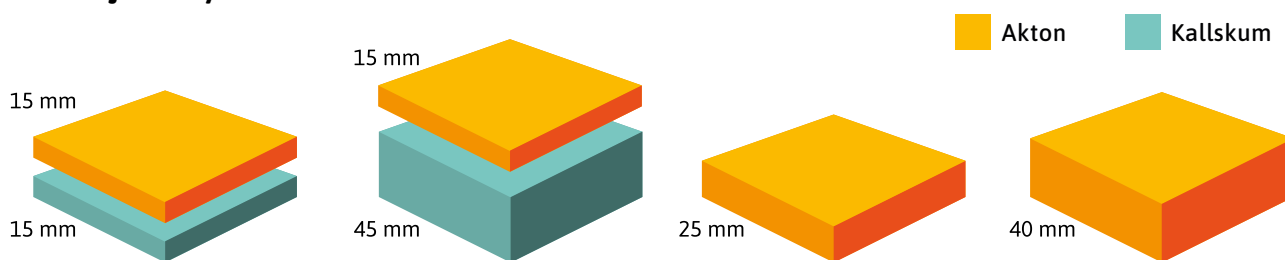



Avlastningsdynor och mattor från Action

Gelen omsluts av en vattentätt och elastisk film som ger den mest skjuvningsbeständiga produkten på marknaden. Den läcker inte och den kan repareras. Materialet fördelar värme vilket minimerar risken för bakterietillväxt. Den absorberar inte fukt som vatten eller urin och tar varken åt sig vätska eller lukt.

Gelen är fri från latex, silikon och mjukgörare vilket gör materialet lämpligt för känslig hud. Kan rengöras med alla vattenbaserade desinfektionsmedel. Eftersom gelen inte läcker ut, kan man kan klippa och skära i materialet. Skärytan tvättas med tvål och vatten, pudras med talk och tejpas sedan med en elastisk vinyltejp.

Anpassningsmattor från Action

De kan till exempel användas på sitsar, ryggstöd, armstöd, bordskivor, vadmattor och fotplattor. Mattorna kan användas som de är eller kläs in i tyg. Det finns två varianter av anpassningsmattor, plan matta eller matta med kuber.



Anpassningsmatta med kuber

erbjuder användaren bästa möjliga skydd mot skjuvning och trycksår vid horisontellt läge och kan placeras under olika delar av kroppen. Matta med kuber erbjuder jämn fördelning av trycket med mycket goda tryckupptagande och stötdämpande egenskaper.

ART.NR	MÅTT	HÖJD
CU2020	51x51 cm	1,6 cm



Anpassningsmatta

kan användas vid olika delar av kroppen när brukaren riskerar skador på grund av skjuvning, som under stuss, rygg, hälar, armar, ben och händer. Mattan kan vikas över kanter på sängen, bordet, fätöljen eller rullstolen och användas vid alla ytor där man vill förhindra skjuvning.

ART.NR	MÅTT	HÖJD
561818	46x46 cm	0,6 cm
541818	46x46 cm	1,3 cm

Avlastningsdynor

Används för avlastning och tryckfördelning på små ytor, som under händer, armbågar, vid knän, vader, fötter eller på andra ställen där man vill få en mjuk och stötupptagande yta. Dynorna ligger i tygfodral för kardborrband för montering.

ART.NR	MÅTT	HÖJD
680806	20x15 cm	1,3 cm
680808	20x20 cm	1,3 cm






Mjuksits för hygienstol från Action


Att placera ovanpå hygienstolar. Är bekväm och ger avlastning vid trycksår och skjuvning. Kardborrlås i varje hörn gör den enkel att fästa. Finns i två varianter. Öppen och stängd. Gelen är speciellt framtagen för trycksårsprevention överdragen med vattentät och elastisk film. Max brukarvikt är 300 kg.

ISO-koder 091209, 043303, 181006

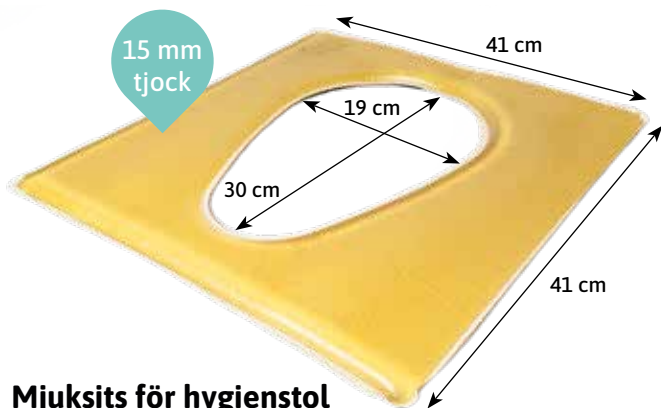

Mjuksits för hygienstol

Vikt 1,8 kg
Art.nr COM1616

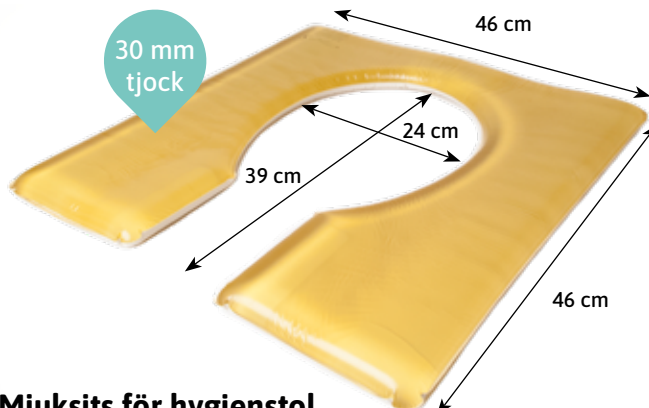

Mjuksits för hygienstol

Vikt 3,7 kg
Art.nr COM1818



Heel up & All up från Levabo

- Hygieniska enpatientprodukter som förebygger och behandlar trycksår.

Heel up och All up är Levabos hygieniska och miljövänliga uppblåsbara enpatientprodukter. Sortimentet är utvecklat i samarbete med ledande sårsköterskor, vilket säkerställer optimal komfort och hygien i behandling och förebyggning av trycksår. Motverkar smittspridning. Heel up och All up används till effektiv förebyggning och behandling av trycksår på de mest utsatta ställen

som exempelvis häl, höft, armbåge, axel, rygg och ända.

Produkterna är multifunktionella, dvs. att samma produkt kan användas i olika avlastningssituationer, så att trycksårspåbyggning och behandling utförs optimalt. Heel up och All up är brukarspecifika enpatientprodukter i ergonomisk design som ger bra stabilitet. Ytterskiktet är

tillverkad av mjukt, smidigt, värme- och fuktabsorberande nonwoven material som gör Heel up och All up behaglig direkt mot huden. Enkel hantering. Heel up och All up blåses upp innan användning och justeras till varje enskild användares anatomi och behov. Luft är det mjukaste att ligga och sitta på.



Heel up används för effektiv förebyggning och behandling av tryckskador på hälar.




Short 32
Art.nr 70001




Medium 39
Art.nr 70007



Long 48
Art.nr 70002

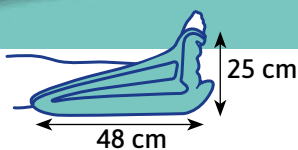

Max 50
Art.nr 70018

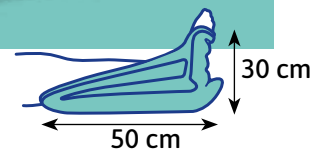

All up används för effektiv förebyggning och behandling av tryckskador på de mest utsatta ställen som exempelvis höft, armbåge, axel, rygg och ända.



Multi Small
25x10x50 cm Art.nr 70003



Multi Medium
37x10x50 cm Art.nr 70004



Multi Large
50x10x50 cm Art.nr 70005



Seat
42x42 cm Art.nr 70008



Back & Seat
40x24x5 cm Art.nr 70009



Handpump
Art.nr 76004



Mjuktoasits från Danmar

Finns i olika utföranden för att underlätta toalettbesök. Enkla att montera på wc-stolar och lätta att rengöra. HEA Mjuktoasits placeras ovanpå den vanliga sittringen. Man faller bara upp locket och trycker fast toasitsen. Båda passar de flesta toalettstolsringar som används i Sverige. Den ovala ringen passar dock inte på ringar som kallas korta. Mjuktoasitsarnas ring är cirka 25 mm hög obelastad. Sittytan är mjuk och känns inte kall. Ett litet hål är ofta till fördel för äldre, för kortväxta personer och barn.

Mjukheten gör sitsen behaglig för tryckkänsliga personer. Sitsarna är gjorda i ett stycke – inga lösa delar att förlora och bra för hygien. Materialet är polyuretanskum med slutna celler. I plastmaterial med slutna celler kan vatten inte tränga in i materialet utan stannar alltid på ytan. Produkten är överdragen med vit vinyl för att få en slät och hygienisk yta.

ISO-koder 091209, 043303, 181006



Rund

Hålets bredd

Hålets längd

Kantbredd

Vikt

Art. Nr

yttermått 225 mm

yttermått 260 mm

70 mm

400g

6850RD



Oval

Hålets bredd

Hålets längd

Kantbredd

Vikt

Art. Nr

yttermått 190 mm

yttermått 295 mm

100 mm

600g

6850OV

HEA Medical AB
Norra Ågatan 10
416 64 Göteborg
031-15 73 20
info@heamedical.se
www.heamedical.se

